

Secret^{RF}Fraksiyonel Radyofrekans
Mikro Altın İğne Mucizesi
10 - 25 - 64 lü...

Neden SECRET

- Fraksiyonel etkinlik ve 2Mhz radyofrekans gücünün tek cihazda toplanmasıdır.
- 3mm'lik 25, ve 64 iğneli kişiye özel başlık seçenekleri mevcuttur.
- Sadece iğne ucunda değil tüm iğne hattı boyunca radyofrekans yayılımı sağlar.

Smart Teknoloji


-Toplam enerjiyi hedeflenen bölgeye istenilen güçte verir ve cilt yüzeyine doğru yaklaştıkça enerjiyi kontrollü bir şekilde düşürür. Bu akıllı teknoloji sayesinde sadece hedef nokta değil, iğnenin geçtiği tüm katmanlara RF enerjisi verilmiş olur, aynı zamanda cilt yüzeyindeki hasarı minimuma indirir. Bunun en büyük avantajı yaz aylarının etkili geçtiği bölgelerde bile işlem yapma imkanı sağlar. Böylece kişi sosyal hayatına kısa süre içinde devam edebilir.

Endikasyonları


- Skar
- Akne Skarı
- Foto Yaşlanma
- Cilt Yenileme
- Geniş Porların Tedavisi
- Göz Kapağı tedavisi
- Yüz ve Boyun Toparlama
- Cilt Yağ Dengeleme
- Axiller Hiperhidrozis (Kol Altı Aşırı Terleme)
- Telenjektazi

SmartCure

- Aktif Akneler
- Ameliyatsız Göz Torbası Tedavisi
- Göz çevresi kırışıklıkları
- Göz altı torbaları
- Kılcal damar tedavisi

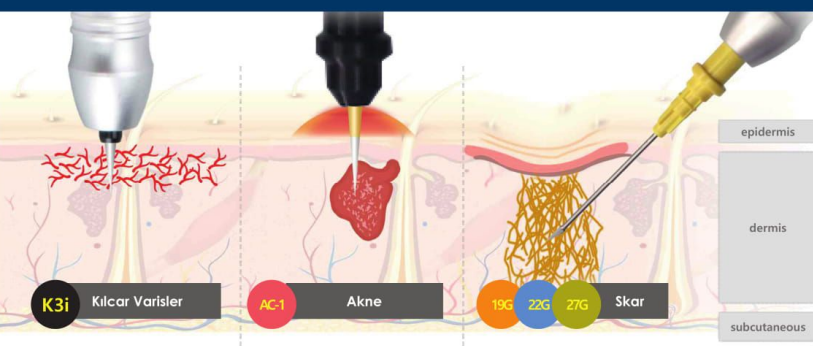

SmartCure akıllı elektro kalem kılcal varislerden,ice-peak skarlarına ve kırışıklıklara kadar geniş bir uygulama alanında tekli elektrolis iğne ve çeşitli nokor iğnelerin kombinasyonu uygulanan termo koagülasyon teknikleridir.

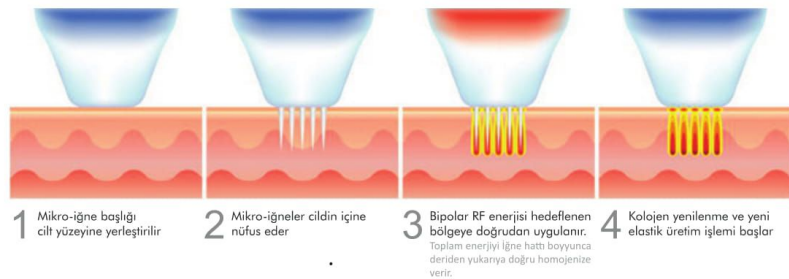

Teknik Özellikler

Micro-Needle Fractional RF system

Maksimum Güç	Max. 25W \pm 10%
RF Frekansı	2MHz \pm 10%
Yoğunluk	0 ~ 100Level (2/5/10 step)
Tekrarlama	0.2 / 0.5 / 0.8 / 1 / 2sec / Single
İğne Kalınlığı	0.25 mm
İğne Şekli	25 Electrode Needle (5x5) / 10 Electrode Needle (1x10)
Tedavi Bölgesi	1 cmx1cm
Ayarlanabilir Derinlik	0.5 ~ 3.5mm (0.1 step)
Tedavi Süresi (RF emisyonu)	50ms ~ 950ms
Elektrik Gücü	100-240VAC, 50 / 60Hz, 220VA Az

Mono Polar RF

RF Frekansı	2MHz \pm 10%
RF Elektrodu	Mono polar
Tedavi süresi (RF emisyonu)	1 ~ 60min (1min step)
RF Elektrod boyutu	Φ 15

SmartCure

Maksimum Güç	9W
RF Frekansı	2MHz
Yoğunluk	10~100 Level (2Step)
İğne Modeli	19G, 22G, 27G, C1

Secret^{RF}



www.kocyigitmedikal.com.tr
www.secretaltinigne.com

KOÇYİĞİT MEDİKAL ESTETİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Barbaros Mh. Al Zambak Sk. Varyap Meridian A Blok D. 82 Ataşehir - İst.

Tel.: +90 216 574 39 61 - 574 41 03 Faks: +90 216 574 39 02

www.kocyigitmedikal.com.tr - info@kocyigitmedikal.com.tr