

# DEPILIGHT

Superior Laser Technology - 808nm



DEPILIGHT  
Superior Laser Technology - 808nm

**Koçyigit Medikal Estetik San. ve Tic. Ltd. Şti**

İnkilap Mah. Seyit Onbaşı Cad.No:31/A Ümraniye İstanbul/TÜRKİYE

Tlf.+90 216 574 41 03 Fax. +90 216 574 39 02


info@kocyigitmedikal.com.tr www.kocyigitmedikal.com.tr



[www.kocyigitmedikal.com.tr](http://www.kocyigitmedikal.com.tr)

## Teknik Özellikler

- |   |   |
|---|---|
| 1) Giriş Voltajı ve Kullanılan Güç              | : 100~240VAC,50/60Hz,700V A                     |
| 2) Elektrik şoklarına karşı koruma türü ve der. | : Class 1 Cihaz ve BF Türü Cihaz                |
| 3) Lazer Çıkışı                                 |   |
| - Lazer Diode Türü                              | : Yüksek güçlü CW Lazer Diode                   |
| - Lazer Diode Gücü                              | : Max 6x60Watt=360Watt                          |
| - Dalga Boyu                                    | : 808nm   |
| - Alan Boyutu                                   | : 9mm X 9mm                                     |
| - Atış süresi:                                  | : The maximum must be within 430ms.             |
| - Atış Tekrarlama oranı                         | : 1~10 Hz / 1Hz Step                            |
| - Soğutma                                       | : Su Soğutma                                    |
| - Optik   | : Safir Kristal                                 |
| - Laser Hazardous Class by IEC60825-1(2001)     | : Class 4                                       |
| 4) Soğutma Kontrolü                             |   |
| - Termoelektrik yarı iletkenlik oranı           | : 5.6V 3.5A x 2 ea.                             |
| - Isı Sensorü                                   | : NTC (Termistör), Doğrusal Voltaj              |
| - Soğutma Kontrol Metodu                        | : Termoelektrik-yarı iletken kontrolü yapılmış. |
| - Sistem Koruma                                 | : Soğutma pompası durduğunda sistem de durur .. |
| 5) Ekran  | : 10.4" Color TFT LCD Panel                     |

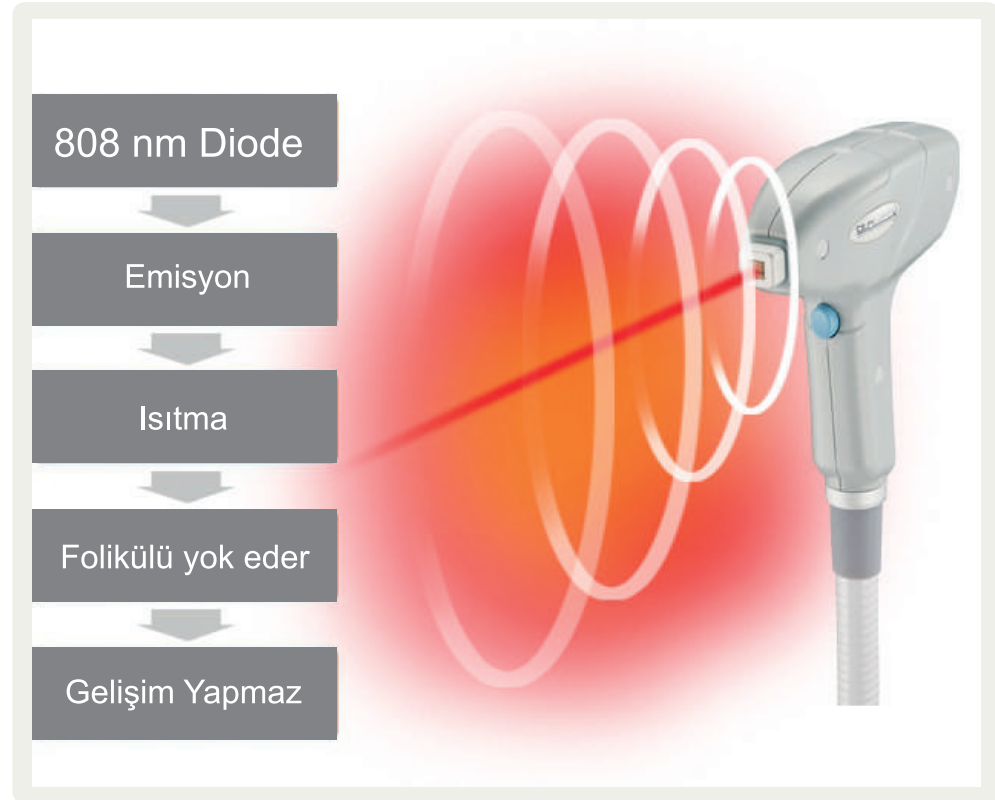

## DEPILIGHT

Superior Laser Technology - 808nm

Diode Laser

## Ütüleme Epilasyonda Profesyonel Seçim

### Neden DEPILIGHT ?

- Ütüleme modu ile ağrısız uygulama
- Kullanımı kolay
- Hızlı ve etkili çalışma
- Her mevsim uygulanabilme olanağı
- Tüm cilt tiplerine uyumlu
- 60Joul/atış imkanı

### Kısa sürede tedavi

- Depilight 9X9 mm'lik geniş başlık boyutu ile 10 Hz FDP Modu ve 3 Hz DP modu ile en kısa sürede tedavi seansını bitirir.

### Kontakt Soğutma

- Yüksek Lazer gücüne rağmen hastaya konfor sağlar.

### Kesintisiz ve Güçlü Lazer Teknolojisi

- 360 Watt güç ve Quasi CW teknolojisi sayesinde atış segmentleri boyunca homojenize enerji gönderimi ile daha etkili, daha güvenli bir kullanım sağlar.

