

Secret^{RF}

Mikro-İğneli Fraksiyonel RF

Teknik Özellikler

Micro-Needle Fractional RF system

Maksimum Güç	Max. 25W ±10%
RF Frekansı	2MHz ± 10%
Yoğunluk	0 ~ 100Level (2/5/10 step)
Tekrarlama	0.2 / 0.5 / 0.8 / 1 / 2sec / Single
İğne Kalınlığı	0.25 mm
İğne Şekli	25 Electrode Needle (5x5) / 10 Electrode Needle (1x10) / 64 (10x10)
Tedavi Bölgesi	1cmx1cm
Ayarlanabilir Derinlik	0.5 ~ 3.5mm (0.1 step)
Tedavi Süresi (RF emisyonu)	50ms ~ 950ms
Elektrik Gücü	100-240VAC, 50 / 60Hz, 220VA Az

Mono Polar RF

RF Frekansı	2MHz ± 10%
RF Elektrodu	Mono polar
Tedavi süresi (RF emisyonu)	1 ~ 60min (1min step)
RF Elektrod boyutu	Φ15

Smart Cure

Maksimum Güç	9W
RF Frekansı	2MHz
Yoğunluk	10~100 Level (2Step)
İğne Modeli	19G, 22G, 27G, C1 A , K3i


Secret^{RF}
Mikro-İğneli Fraksiyonel RF



www.kocyigitmedikal.com.tr
www.secretaltinigne.com



.Tıbbi kullanıma uygun sterilizasyon
.Dayanıklı 32 gauge mikro-iğne

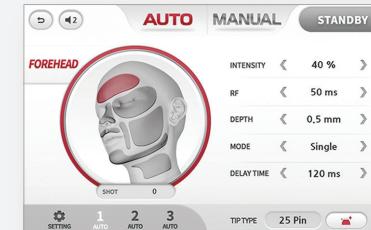

MTR-AC-C64

64 adet yarı yalıtımlı mikro-iğneli kartuşlar
RF enerjisini iğne ucunda verir.



MTR-AC-25

25 adet yarı yalıtımlı mikro-iğneli kartuşlar
RF enerjisini iğne ucundan sonuna kadar azalarak verir.



MTR-AC-10

10 adet yarı yalıtımlı mikro-iğneli kartuşlar
RF enerjisini iğne ucunda verir.

SmartCure akıllı elektro kaleml kılcal varislerden, ice-peak skarlarına ve kırışıklıklara kadar geniş bir uygulama alanında tekli elektrolis iğne ve çeşitli nokor iğnelerin kombinasyonu uygulanan termo koagülasyon teknikleridir.



K3i
İzoleli tek elektroliz iğnesi (0.075mm),
K3i, epidermiste ve çevresindeki dokuda hasar riski olmadan, ısıtma işlemini yalnızca hedef damar ileterek istenmeyen ince çizgileri ve ince damaları tedavi edebilir.
Kılcal damalar için 0.075(mm)'lık izole edilmiş iğne

RF enerjisi ile birleştirilen Subsizyon tekniği, cilt yüzeyine pareler olan esas deri ile subkutan doku arasına hafifçe ileri ve geri hareket eden bir iğneyi sokarak, akne izlerinde belirgin bir iyileşme sağlar.
Sıkılmış sivilce izleri için izole edilmiş subzisyon iğnesi

Secret^{RF}

Mikro-iğneli Fraksiyonel RF

Fraksiyonel Radyofrekans Mikro Altın İğne Mucizesi

Secret Mikro-iğneli RF teknoloji downtime süresi olmaksızın hızlı toparlama ile cildi derinlemesine şekillendirmek için koagülasyon, protein denetürasyonu ve volumetrik işinma sağlar.

Gelişmiş mikro-iğneleme yapan bipolar RF teknoloji, foto-yaşlanma, yüz ve vücuttaki yara izlerinin tedavi etkinliğini artırmak için en etkili tıbbi iğne başlığı ile özellikle ayarlanan derinliklere (0,5 mm ile 3,5 mm) hassas bir şekilde kontrol edilen RF enerjisi uygular.

Smart Teknoloji

Toplam enerjiyi hedeflenen bölgeye istenilen güçte verir ve cilt yüzeyine doğru yaklaşıkça enerji kontrollü bir şekilde düşürür. Bu akıllı teknoloji sayesinde sadece hedef nokta değil, iğnenin geçtiği tüm katmanlara RF enerjisi verilmiş olur, aynı zamanda cilt yüzeyindeki hasarı minimuma indirir. Bunun en büyük avantajı yaz aylarının etkili geçtiği bölgelerde bile işlem yapma imkanı sağlar. Böylece kişi sosyal hayatına kısa süre içinde devam edebilir.

Endikasyonlar

- Skar
- Akne Skarı
- Foto Yaşılanma
- Cilt Yenileme
- Geniş Porların Tedavisi
- Yüz ve Boyun Toparlama
- Cilt Sebum Dengeleme
- Axiller Hiperhidrozis (Kol Altı Aşırı Terleme)
- Telenjektazi

SmartCure

- Aktif Akneler
- Amelitatsız Göz Torbası Tedavisi
- Göz Çevresi Kırışıklıkları
- Göz Altı Torbaları
- Kılcal damar tedavisi
- Yüzeysel lezyonlarda koter

