

Secret^{DUO}

Fraksiyonel 1540nm Er:GLASS Lazer + Mikro-İğneli RF



TEKNİK ÖZELLİKLER

Elektrik gücü	100-240VAC, 50\60 H
Dalga Uzunluğu	1540nm $\pm$ 10%
Lazer Gücü	Maksimum 12W $\pm$ 20%
Darbe Süresi	7004S - 5000/s
Enerji	8.4mJ ~ 60.0mJ
Mesafe	0.1mm ~ 2.0 mm
I-Stack	1st~10th
MOD	Tek, 0.2, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0s
Tedavi Boyutu	Maksimum 10mmX 10mm
Çıkış Gücü	Maksimum 25W $\pm$ 10% (25 pin ile) Maksimum 70W $\pm$ 10% (64 pin ile)
Frekans	2MHz $\pm$ 10%
RF Çıkış Zamanı	50MS - 950MS
Gecikme Zamanı	100ms ~1000ms
Derinlik	0.5mm ~ 3.5mm(0.1 adım)
Mod(Tekrar Zamanı)	Tek, 0.2s, 0.5s, 0.8s, 1s, 2s(Tekrar zamanı)
Yoğunluk(%)	0 ~100(%) (10 adım)
Elektrot	Mikro iğne elektrodu

Secret^{DUO}
Fraksiyonel 1540nm Er:GLASS Lazer + Mikro-İğneli RF



www.kocyigitmedikal.com.tr

KOÇYİĞİT MEDİKAL ESTETİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Barbaros Mh. Al Zambak Sk. Varyap Meridian A Blok D. 82 Ataşehir - İst.

Tel.: +90 216 574 39 61 - 574 41 03 Faks: +90 216 574 39 02

www.kocyigitmedikal.com.tr - info@kocyigitmedikal.com.tr



1540nm ERBİUM GLASS FRAKSİYONEL LAZER

Scan boyutu: 1x1 ~ 10x10mm
Nokta mesafesi: 0.1 ~ 2.0mm.Tıbbi kullanıma uygun sterilizasyon
.Dayanıklı 32 ayar mikro-iğne

I-stack fonksiyonu

Atış tekrarı fonksiyonu ile daha düşük enerji ve daha derin termal etki elde etmeyi mümkün kılın.



MTR-AC-C64

64 adet yarı yalıtımlı mikro-iğneli kartuşlar RF enerjisini iğne ucunda verir.



MTR-AC-25


25 adet yarı yalıtımlı mikro-iğneli kartuşlar RF enerjisini iğne ucundan sonuna kadar azalarak verir.



MTR-AC-10

10 adet yarı yalıtımlı mikro-iğneli kartuşlar RF enerjisini iğne ucunda verir.

SmartCure akıllı elektro kalem kılcal varislerden, ice-peak skarlarına ve kırışıklıklara kadar geniş bir uygulama alanında tekli elektroliz iğne ve çeşitli nokor iğnelerin kombinasyonu uygulanan termo koagülasyon teknikleridir.

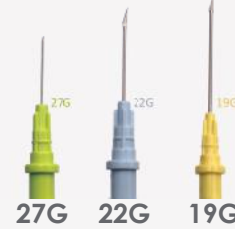

27G 22G 19G



K3i

İzoleli tek elektroliz iğnesi (0.075mm), **K3i**, epidermiste ve çevresindeki dokuda hasar riski olmadan, ısıtma işlemini yalnızca hedef damara ileterek istenmeyen ince çizgileri ve ince damarları tedavi edebilir.**Kılcal damarlar için 0.075(mm)'lik izole edilmiş iğne**

RF enerjisi ile birleştirilen Subsizyon tekniği, cilt yüzeyine pareler olan esas deri ile subkutan doku arasında hafifçe ileri ve geri hareket eden bir iğneyi sokarak, akne izlerinde belirgin bir iyileşme sağlar. **Sıkılmış sivilce izleri için izole edilmiş subsizyon iğnesi**

SecretDUO

Fraksiyonel 1540nm Er:GLASS Lazer + Mikro-iğneli RF

Secret DUO iki Non-ablatif teknolojinin bulunduğu tek cihazdır. Mikro-iğneli RF teknolojisi downtime süresi olmaksızın hızlı toparlama ile cildi derinlemesine şekillendirmek için koagülasyon, protein denetürasyonu ve volumetrik ısınma sağlar. 1540 nm fraksiyonel **Erbium Glass Lazer** Non-ablatif fraksiyonel yenileme cilde minimal yan etki ile geniş bir alanda protein denetürasyonu ve volumetrik ısınma alanı göndererek cildin yenilenmesinde etkili olur. Bu kombine Non-ablatif fraksiyonel yenileme tekniği çok minimal bir downtime ve yan etki ile çok daha mükemmel bir cilt yenileme sağlamaktadır.

ENDİKASYONLAR

1540nm Fraksiyonel lazer

Cilt Yenileme
Akne Skarları
Atrofik Skar
Kırışıklık Azaltma
Cilt Kaldırma & Sıkılaştırma
Tonlama & Doku Yenilemesi

SmartCure

Aktif Akneler
Ameliyatsız Göz Torbası Tedavisi
Göz Çevresi Kırışıklıkları
Göz Altı Torbaları
Kılcal Damar tedavisi
Yüzeysel lezyonlarda koter

RF mikro-iğneli fraksiyonel

Skar
Akne Skarı
Foto Yaşlanma
Cilt Yenileme
Geniş Porların Tedavisi
Göz Kapağı tedavisi
Yüz ve Boyun Toparlama
Cilt Yağı Dengeleme
Axiller Hiperhidrozis (Kol Altı Aşırı Terleme)
Telenjektazi

1540 nm ERBİUM GLASS FRAKSİYONEL LAZER

Non-ablatif fraksiyonel lazer ışını dermise çoklu kolonlar halinde ulaşır ve öncelikli olarak epidermal tabaka üzerinde non-ablatif kolajen ısıtmaya ve dermal şekillendirmeye neden olacak dermal suyu hedef alır. Bu hassas yenileme işlemi ablatif lazerlerle karşılaştırıldığında daha hızlı bir iyileşme ve işlem sonrası yan etkilerinin daha düşük olmasını sağlar.

MİKRO İĞNELİ FRAKSİYONEL RF

Gelişmiş mikro-iğneleme yapan bipolar RF teknolojisi, foto-yaşlanma, yüz ve vücuttaki yara izlerinin tedavi etkinliğini artırmak için en etkili tıbbi iğne başlığı ile özellikle ayarlanan derinliklere (0,5 mm ile 3,5 mm) hassas bir şekilde kontrol edilen RF enerjisi uygular.

