

KOCYİGİT
MEDİKAL ESTETİK

ilooda®

FDA



Secret DUO

Fraksiyonel 1540nm
Erbium GLASS Lazer
+ Mikro-İğneli RF

www.kocyigitmedikal.com.tr

Non-Ablatif Erbium - Glass Lazer Ve Altın İğneli Radyofrekans Sistemi

Secret Duo ikili Non-ablatif teknoloji'nin bulunduğu tek cihazdır. Mikro-iğneli **RF** teknolojisi downtime süresi olmaksızın hızlı toparlama ile cildi derinlemesine şekillendirmek için koagülasyon, protein denetürasyonu ve volumetrik ısınma sağlar. **Erbium Glass Lazer** 1540nm fraksiyonel Non-ablatif yenileme cilde minimal yan etki ile geniş bir alanda protein denetürasyonu ve volümetrik ısınma alanı oluşturarak cildin yenilenmesine etkili olur. Bu kombine non-ablatif fraksiyonel yenileme tekniği çok minimal bir downtime ve yan etki ile çok daha mükemmel bir cilt yenileme sağlamaktadır.

ENDİKASYONLAR

1540nm Erbium Glass Lazer


- Non ablatif cilt yenileme
- Aktif akne
- Atopik skar
- Akne skarı
- Kırıxıklık azaltma
- Cilt sıkılaştırma ve toparlama
- Tonlama

RF Mikro-Needle Fractional


- Ameliyatsız yüz germe
- Cilt yenileme
- Sıkılaştırma
- Kırıxıklık azaltma
- Gözenek küçültme
- Akne izleri
- Skar izleri
- Yüzeyel damarsal lezyonlar
- Stria (çatlaklar)

Secret Duo Avantaj ve Yararları

Secret Duo neredeyse hiç downtime süresiz çok minimal yan etki ile daha verimli ve etkili klinik sonuçları sağlayan alışılmışın dışında tedavi kombinasyonunu sunar. Hastaların tedaviden sonraki 1 ay içinde daha pürüssüz, sıkı, sağlam, daha iyi bir dokuya sahip olacak ve nihayetinde sağlıklı genç bir görünüme sahip olacak. **Secret Duo** aynı zamanda herhangi bir komplikasyonsuz daha geniş çaplı cilt sorunlarını tedavi eder.

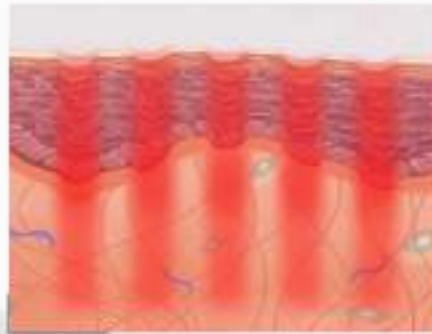

Erbium-glass ablatif olmayan
Fraksiyonel yenileme

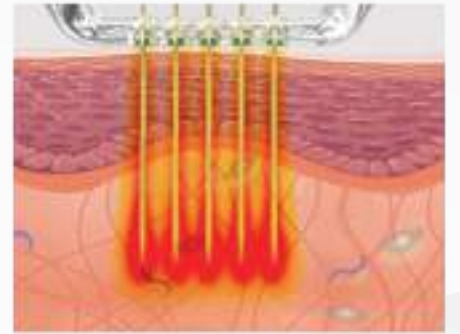

RF Micro-needle
Fraksiyonel yenileme

1540nm ERBIUM GLASS FRAKSİYONEL LAZER

Non ablatif fraksiyonel lazer ışını dermise çoklu kolonlar halinde gönderilir ve öncelikli olarak epidermal tabaka üzerinde non ablatif kolajen ısıtma ve şekillendirmeye neden olacak dermal suyu hedef alır. Bu hassas yenileme işlemi ablatif lazerlerle karşılaştırıldığında daha hızlı bir iyileşme ve işlem sonrası yan etkilerinin daha düşük olmasını sağlar.

Optional 600um lens çok daha hassas yüzey yenileme işlemini neredeyse hiç yan etkisiz çabuk iyileşme ile sağlar.



Altın İğneli Radyofrekans Sistemi

Gelişmiş mikro-iğneleme yapan bipolar RF teknolojisi, foto-yaşlanma, yüz ve vücuttaki yara izlerinin tedavi etkinliğini arttırmak için en etkili tıbbi iğne başlığı ile özellikle ayarlanan derinliklere (0,5 mm ile 3,5 mm) hassas bir şekilde kontrol edilen RF enerjisi uygular.

Sessiz ve Güçlü Başlık; Step motorla 7.kg baskı gücü uygulayarak kararlı iğne girişi sağlamak için donatılmıştır.

25'li iğne kartuşları ile konforlu tedavi imkanı sunar.

MTR-AC-C64

64'lü tam izolasyonlu iğne

İğne ucunda RF enerjisi verir

Tedavi Bölgesi: 17,5x17,5 (mm)

Max Output: 70watt

Teknolojik özelliği: Derin veya yüzeysel yüksek termal etki



32G

MTR-AC-C25

25'li yarı izolasyonlu iğne

İğne hattı boyunca RF enerjisi verir.

Tedavi Bölgesi: 10x10 (mm)

Max Output: 25watt

Teknolojik özelliği: Deri altından yüzeysel doğru azalan termal etki sağlar.



32G

TEKNOLOJİK YENİLİKLER

5 değişik tarama şekli

Tarama ebatı:1x1 10x10mm
Nokta mesafesi : 0.5 2.0mm




Hızlı ve Kolay Uygulama


Atım alanı ve şekli kolay ayarlana bilinir. Tarama alanı çeşitli tedavi bölgeleri için hızlı tedaviyi sağlar. Ayrıca, ayarlanabilir patern endikasyonun biçimine bağlı olarak daha fazla tedavi opsiyonunu sunar.

I-Stach Özelliği

Atış tekrarı foksiyonu ile düşük enerji ile daha derin termal etki elde etmeyi mümkün kılar.

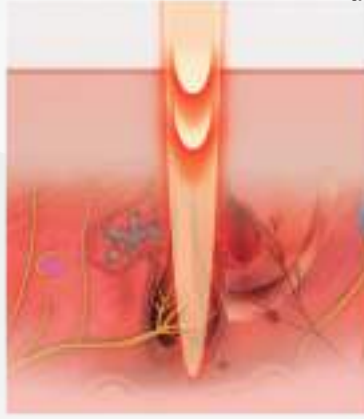


I-stack ve standard mode uygulama derinliği karşılaştırması

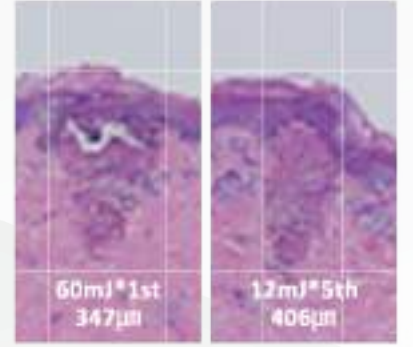

Minimal Ağrı ve Kontrollü Isı Emilimi

Secret Duo nun iğneleri hedef bölgeye eşit miktarda enerji vererek istenmeyen zarar ve eşit olmayan pıhtılaşmadan kaçınılarak pürüzsüz iğneleri ve yüzey kalitesi ile dayanıklı kontrollü enerji gönderimini sağlar.

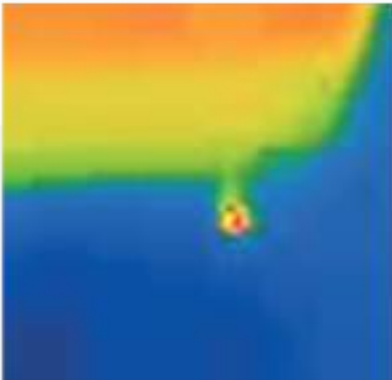

Güvenilir ve Etkif Sonuçlar

Secret Duo minimal downtime ile kusursuz enerjiyi cildin doğru derinliğine gönderen olağanüstü bir cihazdır. Ayrıca, yalıtımsız iğneleri cildin alt ve derin 2 tabakasında uyarırken aynı zaman da alt ve derin dermalde daha geniş modelleme gerçekleştirir.

Epidermal yanık olmaz – sadece termal etki sağlar.

SmartCure

TERMO-PIHTILAŞMA TEKNOLOJİSİ

SmartCure akıllı elektro kalem kılcal varislerden,akne kırışıklık'tan scar'a kadar geniş çaplı endikasyonları tedavi etmek için tekli elektrolis iğne,çeşitli nokor iğne ve kanüllerin kombinasyonu ile uygulanan termo koagulasyon teknikleridir.



K3i

İzoleli tek elektroliz iğnesi (0.075mm),**K3i** epidermiste ve çevresindeki dokuda hasar riski olmadan, ısıtma işlemini yalnızca hedef damara ileterek ince damarları tedavi eder.

Kılcal damarlar için 0.075(mm)'lik izole edilmiş iğne

AC-01

AC-01, yalıtımlı tekli iğne cilde yumuşakça nüfus eder ve yeniden kolajen oluşturarak, yeniden düzenleyerek kırışıklıkları giderir, cildin dokusunu iyileştirir.

1.5mm insulated needle for acne

28G / 19G

Kanül ucunda Rf enerjisi ile kombine edildiğinde kanülü cildin altına, cildin yüzeyine paralel olacak şekilde, dermis ve derialtı bezleri arasında ileri geri hareket ettirerek uzun süreçli belirgin sıkılaşıma ve lipoliz sağlar.





Teknik Özellikler

Elektrik gücü	100-240VAC, 50/60 H
Dalga uzunluğu	1540NM + 10%
Lazer gücü	Maksimum 12W + 20%
Darbe süresi	700us- 5000us
Enerji	8.4mJ ~ 60.0mJ
Mesafe	0.1mm ~ 2.0mm
I-Stack	1st ~ 10th
Mod	Tek, 0.2, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0s
Tedavi boyutu	Maksimum 10mm X 10mm
Çıkış gücü	Maksimum 25W + 10% (25 pim ile) Maksimum 70W + 10% (64 pim ile)
Frekans	2MHz + 10%
RF Çıkış Zamanı	50MS 950MS
Gecikme zamanı	100ms ~ 1000ms
Derinlik	0.5mm ~ 3.5mm (0.1 adım)
Mod(tekrar zamanı)	Tek, 0.2s, 0.5s, 0.8s, 1s, 2s (tekrar zamanı)
Yoğunluk(%)	0 ~100(%) (10 adım)
Elektrot	Mikro iğne elektrodu



facebook.com/kocyigitmedikal



instagram.com/kocyigitmedikal



youtube.com/kocyigitmedikal