

KOCYIGIT
MEDİKAL ESTETİK



ilooda®



VIKINI

808nm 800w Diode Lazer Teknolojisi
Hızlı Ve Acısız Epilasyon


www.kocyigitmedikal.com.tr

VIKINI

VIKINI dünya çapında değişik cilt tipleri üzerinde yüzlerce klinikte kanıtlanmış neredeyse hiç acısız, en güvenilir diode lazer sistemidir. **Vikini 808nm ideal dalga boyuna, 10Hz e kadar en hızlı çalıştırma sistemine sahip ve birden çok seçilebilir atış modu ile bütün cilt tipleri için en iyi epilasyon çözümüdür.**

BİRDEN ÇOK LAZER ATIŞ MODLARI

Vikini 3 lazer atış moduna sahip **FDP, DP1, DP2** ve bu 3 çeşit atış modu kullanıcıya hastanın cilt tipine göre ve daha verimli tedavi sonuçları için lazer atış modunu devamlıdan kısaya, uzuna, kombinasyon veya çoklu atışa değiştirme olanağı sunuyor.

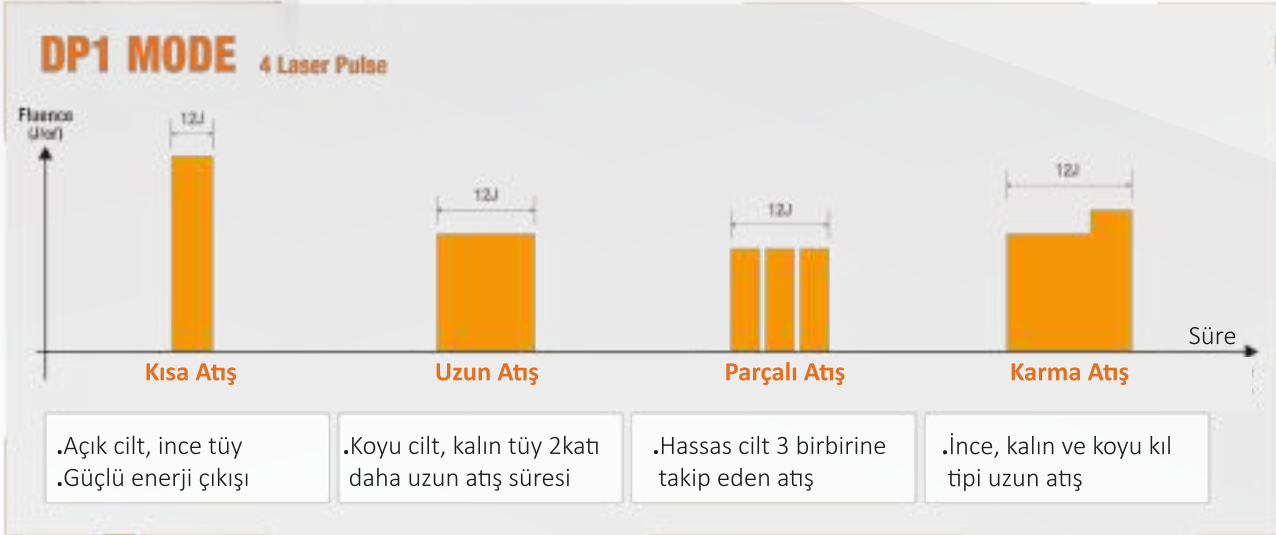



- 12x11mm Spot Ebatı
- 10Hz e kadar Tekrarlama Oranı
- Stabil ve Odaklı Işın Kalitesi
- Güçlü Temas Soğutma



TEKNOLOJİK BAŞLIK

Ayrıcalıklı paralel odaklanmalı teknolojisiyle enerji kaybını azaltarak çok daha stabil ve değişmez ışın kalitesi sağlar ve tüm cilt tiplerinde çeşitli pulse modellerini kombine ederek hızlı, güvenli, konforlu epilasyon gerçekleştirilir.



Güvenli Ve Etkili

Vikini'nin paralel odaklı lazerin dalga boylarını yayarken çok hassas ve bu lazer ışığının kaybını ve saçılımını azaltarak çok daha etkili tedavi sağlar.

Neredeyse Hiç Acısız

Vikini termal zararı en aza indirerek epilasyonu daha konforlu hale getirmek için güçlü safir başlık soğutma sistemine sahiptir.



Ekstra Hızlı

Vikini'nin devamlı atış modu 10Hz'ye kadar hızlı Hızlı atım modu ile tüm epilasyon güvenli ve hızlı bir şekilde kısa sürede gerçekleştirir.



Çeşitli Uygulamalar

Çeşitli lazer pulse modelleri ile her türlü cilt ve tüy tipi için güvenli ve etkili uygulama sağlar, diğer bütün cihazlara kıyasla çok daha az acılı ve çok daha hızlıdır.



VIKINI

Hızlı Ve Acısız Epilasyon

Teknik Özellikler

Dalga boyu	808nm
Lazer Türü	CW Laser Diode
Lazer gücü	800 Watt
Enerji çıkışı	Up to 120 J/cm ²
Spot boyutu	12x11mm
Ariş süresi	Up to 625ms
Atış tekrarlama oranı	FDP: 5 ~ 10Hz / DP1: 1~ 3Hz / DP2: 1 ~ 3Hz
Soğutma	Sapphire Tip Cooling (3°C)
Optik klavuz	Sapphire Crystal
Elektriksel gücü	100~230VAC, 50/60Hz, 2.1KVA