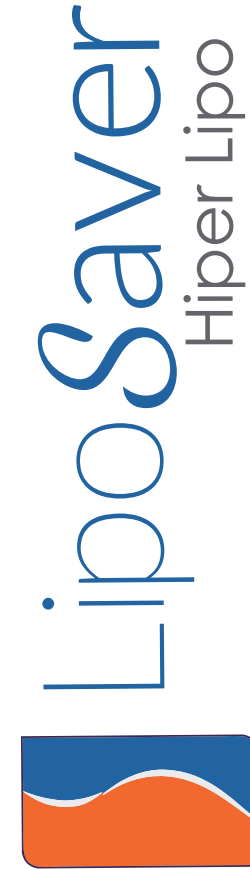




Ultrasound Assist Liposuction

Emulsifikasyon Kaynağı	Ultrason
Boyut	(WxHxL) 396 x 170 x 275
El Aleti	215mm, 300mm
Gövde Ağırlığı	4.3 kg
Çalıştırma Modları	N Modu -Devamlı çıkış Z Modu -Plused çıkış (İşlem oranı: %50)
Problar	01.9 / 02.9 / 03.7 01.2 / 04.0 (opsiyonel)
Prob Dönme Frekansı	35 kHz – 40kHz
Çıkış Akustik Gücü	0-90 W maksimum +-%20
Giriş Gücü	AC 100V – 240V 50 – 60 Hz
Çevresel Çalıştırma Özellikleri	
Çalıştırma Sıcaklığı	10 ila 40o C arasında 50 ila 150o F arasında
Çalıştırma Nemliliği	%15 ila %80 arasında Neme bağlı Donmayan
Atmosferik Basınç	79.051kPa ila 101.325kPa arasında



Ultrasound Assist Liposuction

www.kocyigitmedikal.com.tr

LİPOSAVER

Vücut şekillendirmek için tasarlanmış son teknoloji olan ultrason sistemini kullanır. Yeni liposaver ultrasound teknoloji sayesinde kan damarları, sinirler gibi diğer yapıları korurken seçici olarak yağ oluşumlarını parçalar. Bu nedenle ortaya çıkabilecek ağrı, kanama, sarkıklık ve düzensiz kontürleri azaltır. Geleneksel liposakşın a göre operasyon sonrası çok daha konforludur ve zahmetsizdir. Çoklu kanülleri sayesinde vücudun hemen hemen her bölgesinde kullanılır.

LipoSaver

Hiper Lipo

Ultrasound Assist Liposuction

Dünya Standartlarında Uygunluk

EN 60601-1 ed3.1

EN 60601-1-2 (2007)

EN 60601-1-6 (2010)

IEC 62366 (2007)

ISO 14971 (2012)

Kanüller

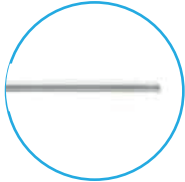
* Boyut: in / mm , D: Çap , L: Uzunluk



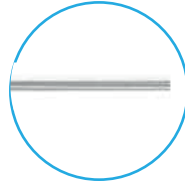
P1.2D

Boyut: D = 1,2 / L = 123
Yüz ve Çift çene
Açıklama: isteğe bağlı

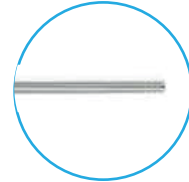
P1.9D-G1

Boyut: D = 1,9 / L = 123
Kullanım: Face & Çene Yağ Bezesi

P2.9D-G2

Boyut: D = 2,9 / L = 317
Kullanım: Kol & Karın
Üst Bacak & Popo Altı

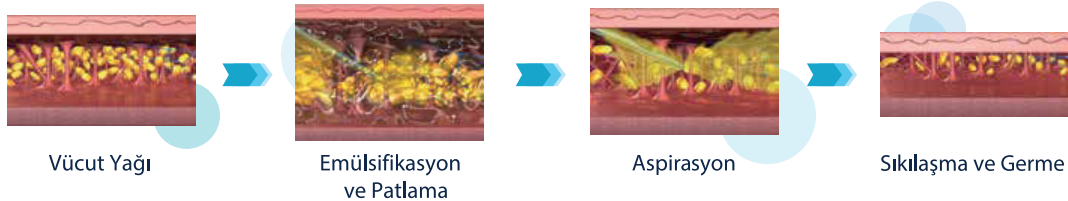
P3.7D-G3

Boyut: D = 3,7 / L = 330
Kullanım: Karın
Üst Bacak & Popo Altı

P3.7D-G1

Boyut: D = 3,7 / L = 330
Kullanım: 5D Liposculpture
Açıklama: İsteğe bağlı

Ultrason kavitasyon etkisini kullanarak birden fazla küçük kesiler aracılığıyla vücudun belirli bölgelerindeki hedef yağ parçalarını ve emülsifiyelerini yok eder

Çalışma Sistemi**Ultrason Destekli Liposuction****LS-1000**

- Uzun Prob (330mm)
- Kablo ile Otoklavlanabilir El parçası
- Çıkış Gücü Güçlü ve Kararlı

Kolay
UygulamaDaha Hızlı
SonuçDaha
Güvenli**LİPOSAVER**

Geniş bölgelerde fazla miktarda yağ almada başarılı olduğu kadar vücut şekillendirme gibi zahmetli işlemlerde de oldukça zahmetsiz ve kolaydır.

Özel tasarlanmış titanyum kanülleri sayesinde 200-250 hasta uygulaması yapabilmektedir. 1,2mm ve 1,9mm yüz kanülleri sayesinde yüz ve gıdı bölgelerinde güvenli kullanım