



KOCYİGİT
MEDİKAL ESTETİK


ilooda®



CURAS
Advanced Q-switched Nd:YAG

www.kocyigitmedikal.com.tr

CURAS

ADVANCED Q-SWITCHED ND:YAG


Curas Q-switched Nd_YAG lazer sistemi, dövme silme, melazma, ablatif olmayan yüzey yenileme, ve pigmentli lezyon tedavilerinde en ideal performansı sağlar. Ayrıca **Curas**'ın çift dalga boyları, 1064/532nm doktorlara her hastanın ihtiyacına göre tedavi verimliliğini arttırıcı geniş yelpazeli uygulama alternatiflerini 3 değişik başlık seçeneği ile sunar.

ENDİKASYONLAR


Dövme Silme
Pigmentli Lezyon
Melazma
Soft Peeling
Tüy Sarartma
Tırnak Mantarı
Cildi Canlandırma

Güneş ve Yaşlılık Lekeleri
Epidermal Lekeler
Dermal Lekeler
Kahve Lekesi
Karbon Pelling
Tüy Sarartma

1064nm

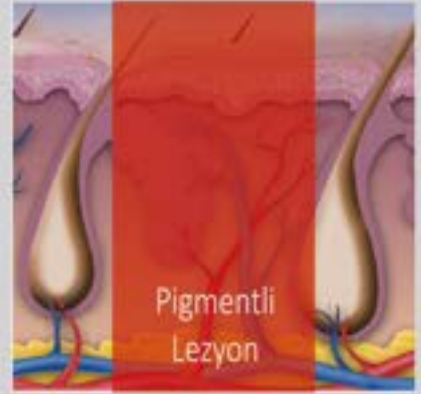

532nm

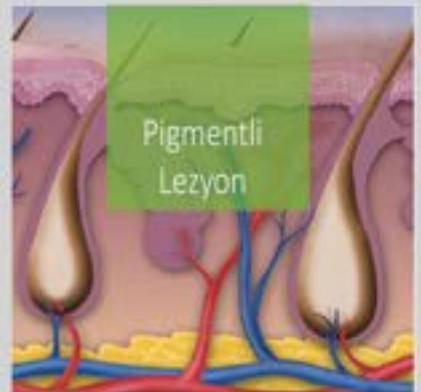

3 FARKLI TEKNOLOJİK BAŞLIK

Odaklı Başlık

1mm adım ile 2mm den 10mm ye ayarlanabilir.

Başlıca kullanım:

Mode – Q 1064, Q 532, PTP 1064, M 1064, A 1064

Endikasyonlar – Epidermal & Dermal pigmentler
Dövme silme

Karbon Peeling Başlık

Soft peeling için 8 mm sabit ayarlı başlık.

Başlıca kullanım:

Mode – Q 1064, PTP 1064, M 1064

Endikasyonlar – Tüy Sarartma
Soft Peeling, Karbon Peeling

OPSİYONEL

MLA Piko Başlık


74 Fraksiyonel noktalar
7mm daire içinde

Her bir noktada 15 kat daha fazla enerji
3 mesafe goju :
35 mm, 25mm, 15mm

Başlıca kullanım: Mode-Q1064, Q532
Tedaviler: İzler, cilt yeniden canlandırma, melazma, lazer tonlama ve dövme silme




LIQB (Lazer kaynaklı optik bozulma)

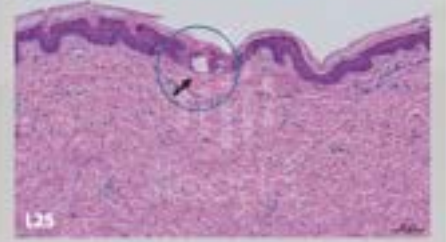


MLA Curas'tan kaynaklı DEJ (Dermoepidermal Junction) mikro boşluk epidermiste yeniden canlanmanın artarak cildin kendisini iyileştirmesine yardım etmesi beklenir.

CURAS HASSAS ATIM MODLARI

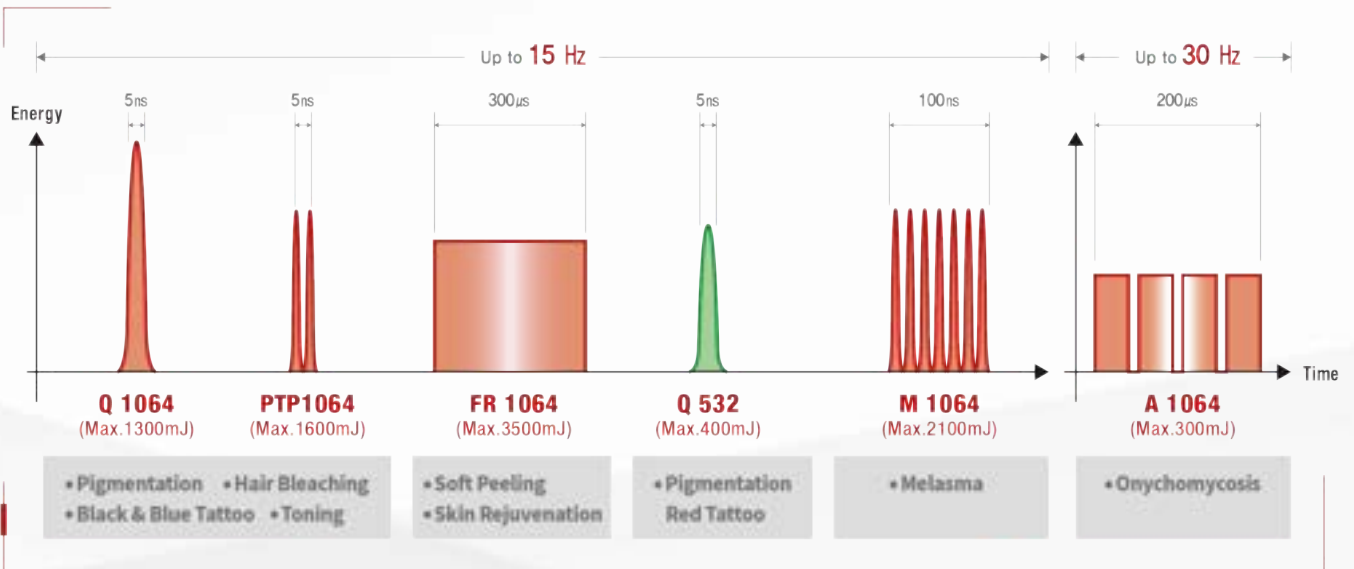


Stabil Enerji Q1064 Q532

CuRas'ın üstün enerji stabilitesi ile lazer ışını istenilen termal enerjiyi hedeflenen bölgeye uzun süreli atışlar ile gönderimini sağlar ve çevredeki dokuya verilen hasarı en aza indirerek tedavi etkinliğini artırır.

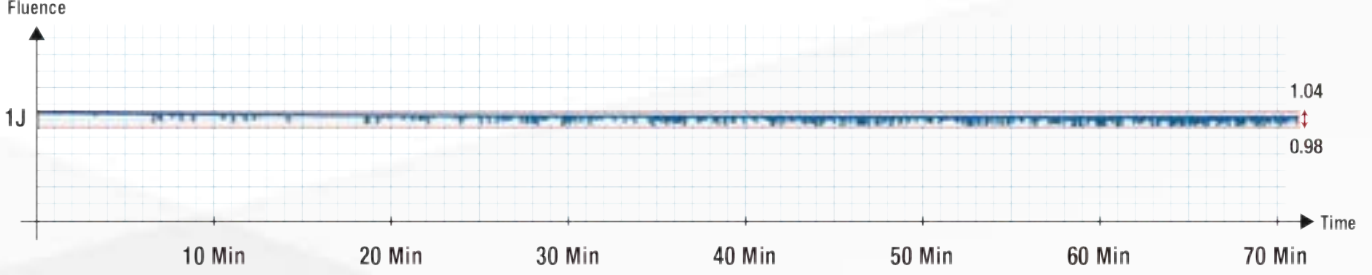

Hızlı ve Etkili

PTP mod yüksek enerjiyi iki atışla gönderir ve yüksek enerjiyi etkili bir tedavi için kullanır, hatta büyük spot ebatlı tek atışlı enerjiye kıyasla kontrol eder hızlı tedavi sağlar ve hasta konforunu artırır.

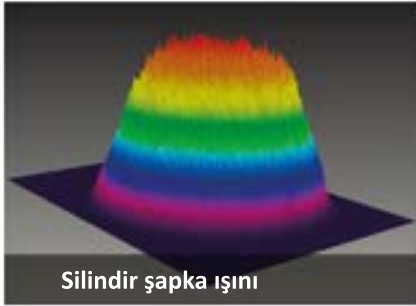

Silindirik Işın Profili

Tektip daire biçimli ışın profili Curas ın tektip ve doğru, yüksek kaliteli ışının hedeflenen alana güvenli ve efektif bir şekilde ikili kompakt lazer kaynağı aracılığıyla gönderir. (Çift Rood-Çift lamba)



Kolay ve Güvenli

Etkili tedaviler için uygun boyutu rahatlıkla seçebilmeniz için zoom başlığının spot ebatı 1mm'lik ayarlama ile 2 mm den 10 mm ye kadar ayarlanabilir.



Önceden Hazırlanmış Protocol & Depolama Modu

En yaygın protokol yeni kullanıcılar için ayarlanır ve uzman hızlı tedavi hazırlığı için 100'den fazla protokol kayıtlıdır.




CURAS
Advanced Q-switched Nd:YAG

Teknik Özellikler

Lazer Kaynağı:	ND:YAG + Q Switched Lazer
Dalga Boyu:	1064nm/532nm
Çalıştırma Modu:	Q 1064 /PTP 1064 / Q 532 M 1064 /A 1064
Atış Enerjisi:	Max. 1300Mj (Q1064) Max.1600 mJ (PTP 1064) Max.400 mJ (Q 532) Max.2100 mJ (M 1064) Max.300 mJ (A 1064)
Enerji Kalibrasyonu:	Manuel Kalibrasyon
Soğutma Sistemi:	Kapalı Devre Hava Su ve Hava Soğutma
Atış Genişliği:	5ns~20ns (Q 1064) 5ns~20ns (PTP 1064) 5ns~20ns (Q 532) 300us(FR 1064) 100ns(M 1064) 200~300us (A 1064)
Spot Alanı:	2~10mm Odaklı Başlık / 8mm (Peeling Başlık)
Atım Frekansı:	Saniyede 1-15 Hz (Q 1064,PTP 1064 532,M 1064), 30 Hz (A 1064) Ayarlanabilir.
Giriş Gücü:	220-230 VAC,50/60 Hz
Ekran Türü:	Dijital ve Dokunmatik Ekran
Ebatlar:	355(W)mm X 672(D)mm X 979(H)mm
Ağırlık:	84 Kg (Tekerleklidir)