

KOCYİGİT
MEDİKAL ESTETİK



TERR RF

**Yeni Nesil Çok Dalgalı
RF Teknolojisi**

www.kocyigitmedikal.com.tr

Torr Rf ısı kullanarak yüz ve vücut şekillendirme, cilt kolajeni'nin yeniden üretilmesi, cilt sıkılaştırma, kırışıklık tedavisi ve selülit tedavisi gibi işlemlerin yanı sıra gıdı lipolizi ve vücut lipolizi işlemlerini başlıklarda bulunan termal ısı kontrolü özelliği sayesinde ağrısız ve acısız güvenli bir tedavi sağlar.


Yeni nesil yöntemle enerji dağılımına sahip ve çok dalgalı radyofrekans teknolojisi hacimsel termal ısıya çok sayıda radyofrekans enerji akışına çevirerek cilde nüfus eder. **RF dalgaları ister derin ister yüzeysel gerçekleştirebilir. Tedavi sırasında oluşan ısıyı kontrol eder.**

ENDİKASYONLAR


- Cilt Sıkılaştırma
- Bölgesel Yag Azaltımı
- Göz Çevresi
- Vücut Sıkılaştırma
- Kol ve Bacak Sıkılaştırma
- Selülit Azaltımı
- HA Dolgu (Dolgu eritme)
- Kırışık Azaltımı
- Gıdı Toparlama
- Jinekomasti

Çok Dalgalı RF Teknolojisi

Yeni nesil enerji dağılımını cilde kontrollü bir şekilde yayılır.

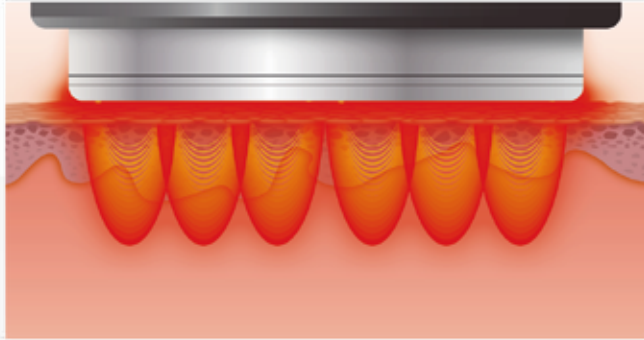

**Target
Low mod
(Yüzeysel Mod)**

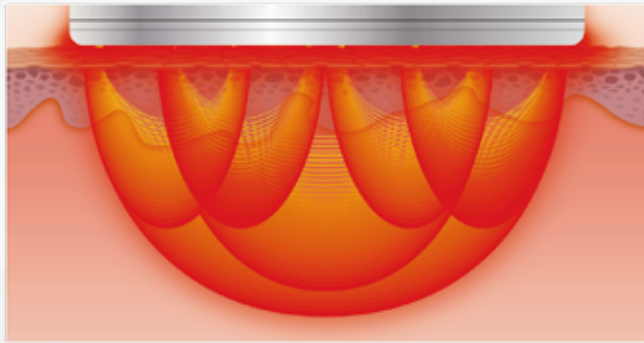

**Target
Deep mod
(Derin Mod)**



Torr Rf uyguladığı enerjiyi düzenli ve eş zamanlı olarak birden çok elektraların arasında hareket eder ve eşit bir şekilde bütün tedavi bölgesinde efektif enerji dağılımı gerçekleştirir. Bu teknoloji enerji dağılımı diğer RF sistemlerinden farklı olarak termal enerjinin iki farklı derinliğe düşük güçte enerji göndermesini sağlar.


Otomatik dairesel hareketli ve vibrasyonlu vücut başlığı

Patentli otomatik dairesel başlık uygulamada rahatlık sağlar. Özellikle büyük bölgesel tedavilerde konfor sağlar.




Gerçek zamanlı termal ısı kontrolü

Gerçek zamanlı sıcaklık kontrol özelliği ile ideal sıcaklığı eşit oranda ve güvenli bir şekilde uygulamayı cilt derecesini düzenli olarak ve gözlemleyerek uygular

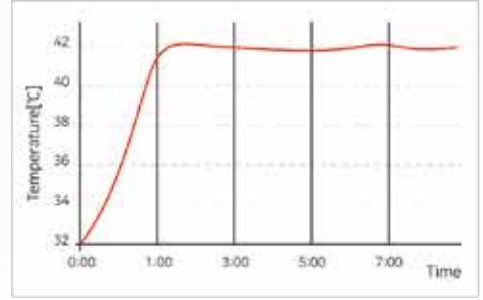


Seçilebilir cilt derinliği

İki değişik derinlik seçme opsiyonu hastalardaki endikasyonlara ve hasta durumuna bağlı olarak ideal tedavi etkinliğini mümkün kılar

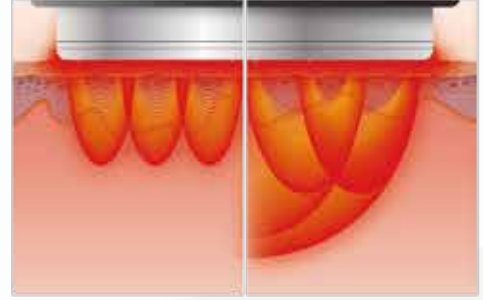

Çoklu atış modu

Güvenli olarak termal enerjiyi, hedeflenen alana ısı oluşumu yoluyla atışlar arası düşük enerjiyle uygular.

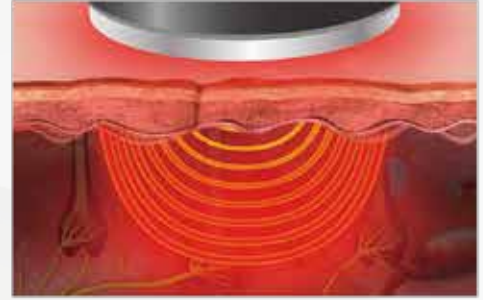

Rahat tedavi için vibro konfor modu

Vibro rahatlık modu ile tedavi bölgesine direk ısı hissini azaltmak, oto mekanik dalga aracılığıyla sağlanır. Tedavi sırasında hastanın rahat hissetmesine neden olur.



Çoklu Başlık Seçeneği

Torr RF ideal şekillendirme sıcaklığını tedavi bölgesine bağlı olarak farklı başlık seçenekleri ile **1.5mm den 10mm** ye kadar değişik derinliğe uygulanması için özel olarak tasarlanmış termal ısı kontrollü başlıklara sahiptir.



Yüz Başlığı Vibrasyonlu

Başlık çapı:40mm
Nufus edilecek derinlik;2,5mm-6mm
Kullanılan güç; en fazla 55w
Kullanım; otomatik olmayan, elle çalıştırılan




Vücut Başlığı Vibrasyonlu dairesel masaj özelliği

Başlık çapı:50mm
Nufus edilecek derinlik;3,5mm-10mm
Kullanılan güç; en fazla 55w
Kullanım; elle çalıştırılan veya otomatik



Sadece göz çevresi değil diğer ulaşılması zor bölgelerde ve elmacık kemiği bölgesinde de kullanılır.

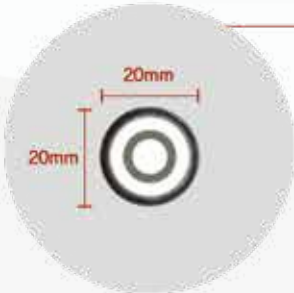


Göz çevresi başlığı

Başlık çapı:20mm
Nufus edilecek derinlik;1,5mm-2mm
Kullanılan güç; en fazla 7,5 w
Kullanım; elle çalıştırılan



TERMAL ISI GÖSTERGESİ

Bu termal görselde hscimsel termal ısıнын derinin hedeflenen bölgelerde değişik derinliklere gönderilmesini gösterir.

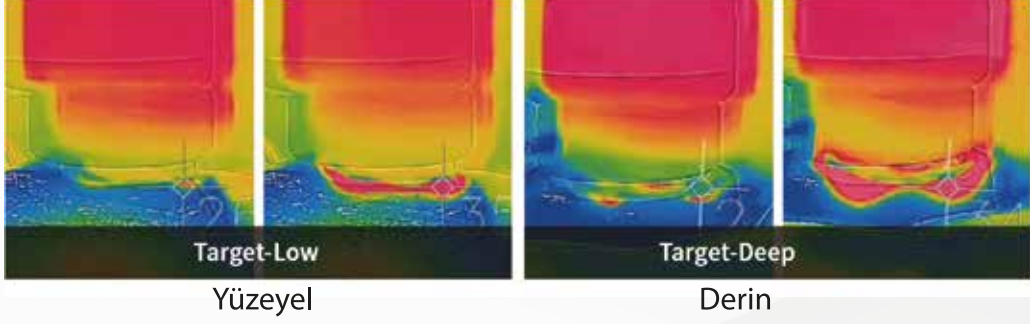

Teknik Özellikler

Tedavi Mode	Göz çevresi, Yüz, Vücut
Frekans	1MHz
Çıkış Gücü	Max 55W
Mode	Tek / Atış / Tekrar
Hedef	Yüzeyel / Derin
Sıcaklık Limit	30C° 50C°
Güç	10 - 100%
Zaman	1 - 60 Dakika
Titreşim	On / Off
Hareketli	On / Off



facebook.com/kocyigitmedikal



instagram.com/kocyigitmedikal



youtube.com/kocyigitmedikal