

KOCYIGIT
MEDİKAL ESTETİK



VELOCE
BBL[™]
Broad Bant Light

www.kocyigitmedikal.com.tr

VELOCE BBL Geniş Bant Işık teknolojisi ikili Xenon lamba sayesinde düşük enerji ile cilt altına etki edebilen ve farklı nanometrelik ,filtreleri sayesinde bir çok cilt problemlerinde etkin olarak kullanılan bir ışık sistemidir. Bu sistem yoğun ve hassas darbeli bir ışık atımı yaparak tedavinin oldukça hızlı ve etkili olmasını sağlar.



ENDİKASYONLAR

Genel Pigmente Lezyonlar
Çil Tedavisi
Lentigo
Melazma
Vasküler Lezyonlar
Telanjiektazi
Poikiloderma
Eritem

Cilt Gençleştirme
Cilt Sıkılaştırma
Akne&Akne Rezasea
Atif Akne
Rozasea
Cilt Tonlama
Epilasyon
Fotodinamik Tedavi (PDT)

Veloce BBL Teknolojisinin 3 Önemli Özelliği

Geniş alan atış özelliği,
Güçlü soğutma foksionu,
Çift lamba teknolojisi,
Bu özellikleri ile doğru sonuca güven
ve kolaylıkla ve düşük maliyetler ile gerçekleşir.

Geniş Alan Atış Özelliği


Veloce BBL daha yüksek güvenli
yapısı ile çok daha etkili bir tedavi için doğru
işlem alanını sağlayan geniş alan atış
teknolojisine sahiptir.

**VELOCE BBL enerjiyi %95'te sabit
ve doğru bir şekilde tutar.**



Atış süresi

**Diğer cihazlar enerjiyi sabit tutamaz çünkü yüksek
şiddetli çıkış enerjileri ile karmaşık bir yapıya sahiptir.**

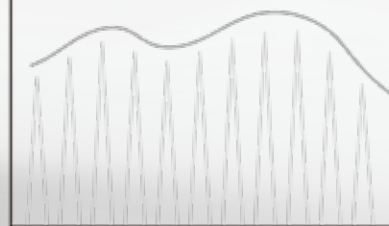

Atış süresi


GENİŞ BANT IŞIK TERAPİSİ



PW500, ışığı 500nm ile 600nm arasında ileten özel bir filtredir. PW500 hemogloblin için yüksek emilim oranına sahiptir. Pigmente ve damarsal problemler için lazer sistemlerine benzer çok daha etkili sonuç verir.

NT800, ışığı 800nm ile 1400nm arasında iletebilen derin dermal katmanına nüfuz edebilen özel tasarlanmış bir filtredir. Dermal katmanı kademeli olarak 40-45C° 'ye kadar ısıtarak cildin etkin bir şekilde sıkılaşmasını ve gençleşmesini sağlar.

Akıllı Değiştirilebilir Filtreler - Farklı dalga boyların da geniş spektruma sahip filtreler uygulayan kişiye diğer yaygın sistemlere göre daha belirgin ve doğru tedavi imkânı sağlar.

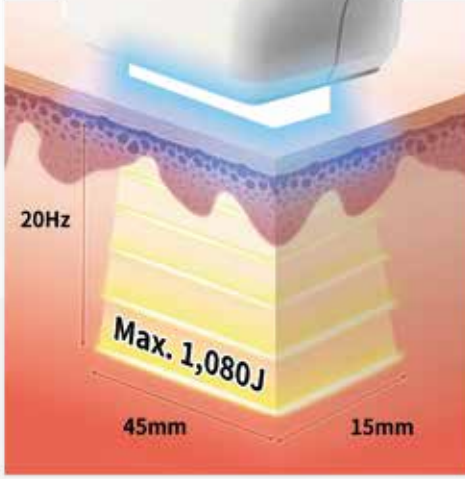


Güçlü Soğutma Kontrolü


Kontak soğutmalı güçlü safir başlık, cilt yüzeyini tüm tedavi süresince soğuk ve güvenli tutar.

Hızlı İşlem Özelliği

45x15mm başlığı ile en geniş spot büyüklüğüne sahip cihazlarından biridir. Saniyede 1,080j enerjiyi iletmesi ile yüksek yoğunlukta güce sahiptir. Bu sayede tedavi daha hızlı gerçekleşir ve istenilen sonuca kısa sürede ulaşılır.

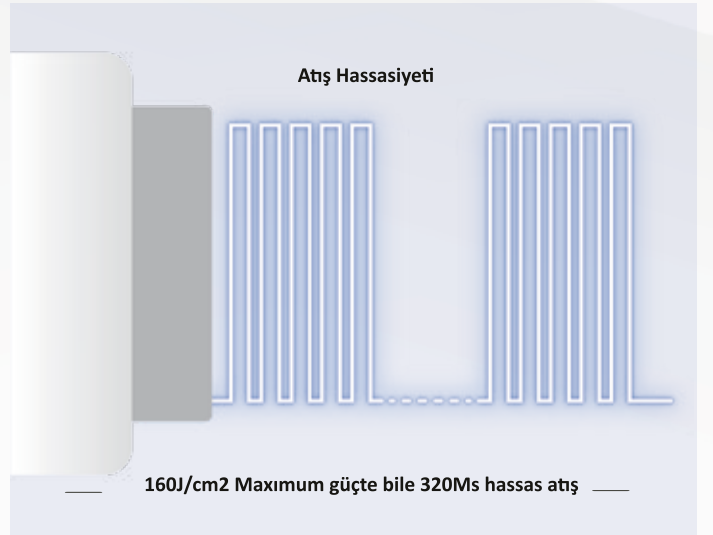

ŞİMDİYE KADAR YAPILAN EN HIZLI TEDAVİ

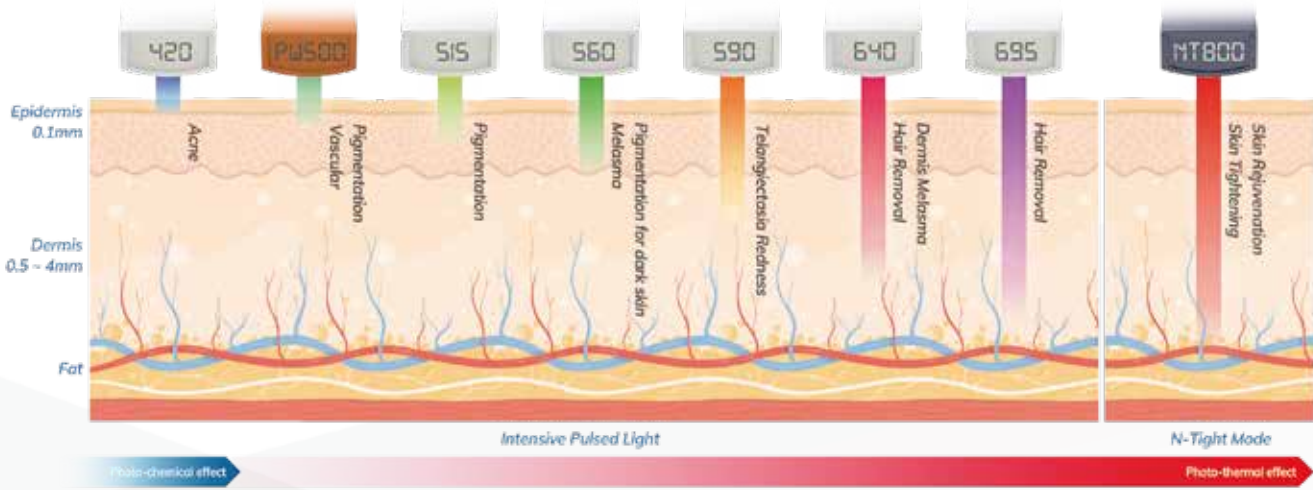


İkili Xenon Lamba Teknolojisi

Stabil enerji ve kesinlik için sistemin çok önemli rolü vardır. Çünkü her lamba sadece ihtiyaç duyulan enerjinin yarısını kullanır. Bu özellik minimum bakım maliyeti ile birlikte en dayanıklı cihazlardan biri yapar.

Akıllı Adaptor ve Spot Bloklar

Hedeflenen alanda hiçbir zarar vermeden kesin tedavi ihtiyacınız olan herşeyi sağlar. Tedavi çok beklemeden çabuk iyileşme ile daha etkili ve verimli olacaktır.

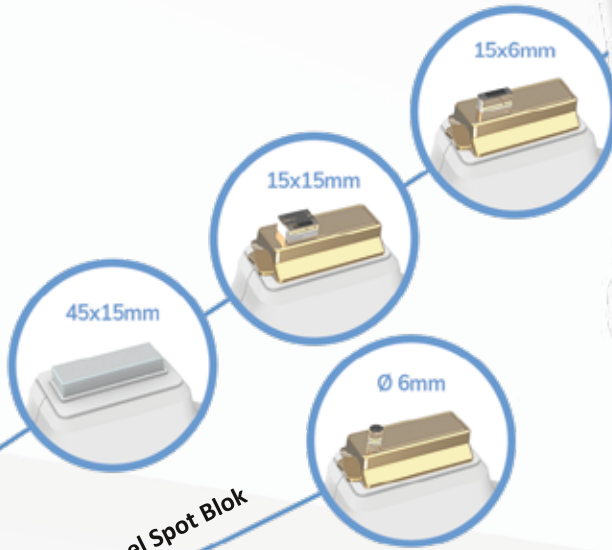

Standart Spot Bloklar

Opsiyonel Spot Blok

VELOCE BBL

Hızlı Atış Sistemi

Veloce BBL (Geniş Bantlı Işık) Hızlı teknolojisi ile ayarlanan bir ışık gücünü maksimum 320ms'ye bölerek atışın tamamı süper yüksek hızda kayıpsız oluşmaktadır. Toplam enerji 1080J (180W/saniye ve 20Hz'de sürekli işlem yapılır. Standart ve opsiyonel safir odak başlıkları ile kontrollü spot atışları sağlar.

Akıllı Multi Atış ile Kusursuz ve Odaklı Enerji Kontrolü;

Ultra-Hızlı atış modunda bile stabil enerji ve odaklı lazer çıkışı ile yüksek enerji yayılımı, maksimum tedavi etkisi sağlar. **Opsiyonel olan NT800 ve PW500** filtreler ile geniş bir tedavi olanağı sunar. **8 Farklı akıllı filtre modeliyle birçok cilt problemini tedavi eder.**



TEKNİK ÖZELİKLER

Dalga Uzunluğu:	420 ~1400nm
Filtreler:	420nm, 515nm, 560nm, 590nm, 640nm, 695nm,
Akım:	35J / Cm² Max
Maksimum Enerji:	235J
Atış Genişliği:	5 ~ 320ms
Tekrarlama Oranı:	Max. 1Hz
Soğutma Derecesi:	0 ~25°C (Oda Sıcaklığı 25°C)
Spot Alanı:	45 x 15mm (6.75 Cm²), 15 x 15mm, 15 x 6mm
Ağırlık:	85 kg
Ölçüler:	480 (E) x 826 (B), 1094 (Y) mm
Güç Tüketimi:	220 VAC, 60Hz, 4.3KVA
Opsiyonel	
Spot Bloklar:	ø 6mm
Filtreler:	NT800 / PW500

