

KOCYİGİT
MEDİKAL ESTETİK

ilooda®

FDA



Secret^{RF}
Fraksiyonel Mikro-İğneli RF

www.kocyigitmedikal.com.tr

SECRET RF SİSTEMİN SIRRI

Secret RF mikro-iğneli RF teknolojisi downtime süresi olmaksızın hızlı toparlama ile cildi derinlemesine şekillendirmek için koagülasyon, protein denetürasyonu ve volumetrik ısınma sağlar. Gelişmiş mikro-iğneleme yapan bipolar RF teknolojisi, foto-yaşlanma, yüz ve vücuttaki yara izlerinin tedavi etkinliğini arttırmak için en etkili tıbbi iğne başlıkları ile özellikle ayarlanan derinliklere (0,5mm ile 3,5mm) hassas bir şekilde kontrol edilen RF enerjisi uygular.

ENDİKASYONLAR

Cilt yenileme
Sıkılaştırma
Kırışıklık azaltma
Gözenek küçültme
Kılcal damar

Akne izleri
Skar izleri
Yara izleri
Yüzeyel damarsal lezyonlar
Stria (çatlaklar)

Secret^{RF}

FRAKSİYONAL RF TEKNOLOJİSİ

Secret RF hassas 2MHz iki kutuplu RF kullanır. Bu teknolojiye bulunan mikro-iğneler epidermisteki hasarı minimuma indirmek için güçlü ve sinerjik efek sunar. Hassas şekilde kontrol edilen RF enerjisi derinlik 0.5mm'den 3.5mm'ye kadar olan patentli yalıtımlı ve yalıtımsız iğneleri ile subdermal efekte ve derin dermal pıhtılaşmaya neden olur. Çok büyük ısıya ve doğal yapısını boza bilme özelliğine sahip, bu derinin yeniden modelleme yapabilmesi için subdermal ve dermal katmanların fibroblastını uyandırır. Ayrıca, bütün cilt tiplerini tedavi eder.




Deep dermis in doğal yapısını bozmak.



2 haftalık tedavide yara iyileşme süreci ile yeniden kolajen üretimi

Secret^{RF}

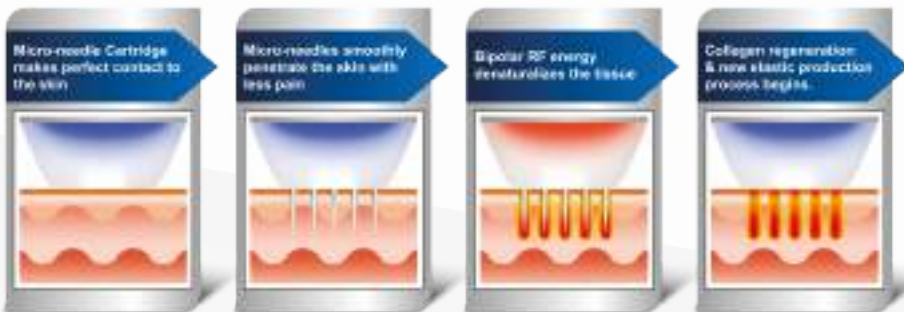

TEKNOLOJİK İĞNE KARTUŞLARI

Kusursuz olarak kontrol edilen micro-needle başlıklar yüzde ve vücuttaki çok çeşitli endikasyonlar için, acı ve ağrıyı minimuma indirmek, tedavi verimliliğini arttırmak amaçlı çeşitli medikal dereceli 32 G iğneli kartuşlarla kombine edilmiştir.

SecretST
• Dimension ; 140 * Ø40(mm)
• Weight ; 170g

Sessiz ve Güçlü Başlık; Step motorla 7.kg baskı gücü uygulayarak kararlı iğne girişi sağlamak için donatılmıştır.

25'li iğne kartuşları ile konforlu tedavi imkanı sunar.



32G

MTR-AC-C25

25'li yarı izolasyonlu iğne

iğne hattı boyunca RF enerjisi verir.

Tedavi Bölgesi: 10x10 (mm)

Max Output: 25watt

Teknolojik özelliği: Deri altından yüzeye doğru azalan termal etki sağlar.

Secret^{EX}
• Dimension ; 106.5 * Ø62 * Ø41(mm)
• Weight ; 500g

Yüksek hızlı başlık; 64'lü başlık sayesinde daha hızlı uygulama imkanı sağlar.

MTR-AC-C64

64'lü tam izolasyonlu iğne

iğne ucunda RF enerjisi verir

Tedavi Bölgesi: 17,5x17,5 (mm)

Max Output: 70watt


Teknolojik özelliği: Derin veya yüzeysel yüksek termal etki



32G

TEKNİK ÖZELLİKLER

Secret Rf bazı ayrıcalıklı teknik özelliklere sahip ve bu özellikler hedeflenen alanda eşit kapsamayı, hem doktor hemde hasta için maksimum tedavi güvenliğini sağlar.

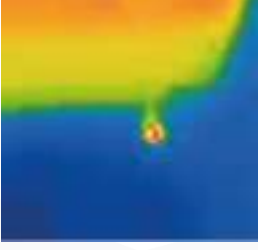

Güvenilir ve Etkifit Sonular

Secret RF minimal downtime ile kusursuz enerjiyi cildin doėru derinliėine gnderen olaėanst bir cihazdır. Ayrıca, yalıtımsız iėneleri cildin alt ve derin 2 tabakasında uyarırken aynı zaman da alt ve derin dermalde daha geniř modelleme gerekleřtirir.


Epidermal yanık olmaz – sadece termal etki saėlar.

Minimal Aėrı ve Kontroll Isı Emilimi

Secret RF iėneleri hedef blgeye eřit miktarda enerji vererek istenmeyen zarar ve eřit olmayan pıhtılařmadan kaınılarak przsz iėneleri ve yzey kalitesi ile dayanıklı kontroll enerji gnderimini saėlar.


Tam ve Gvenli Tedavi

Delay time ve grsel belirtiler hastanın gvenliėi iin RF enerjisini tamamiyle verilene kadar iėneyi en son pozisyonda tutmak iindir. Genel olarak, bu ayrıcalıklı hareket kontrol teknolojisi uygulama sırasında cildin yzeyinde tahmin edilemeyen hasarları engellemek iin maksimum gvenlik saėlar .

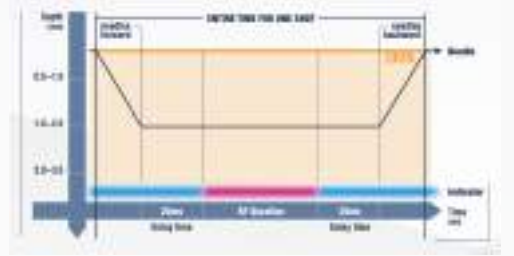

Hızlı ve Kullanımı Kolay

Kullanıcıya yardımcı ekranı (GUI) doktor ve hastalar iin birden ok duruma karřı iřlemi kolay ve basit hale getirmek adına etkin nceden hazırlanmıř parametre ler sunar.

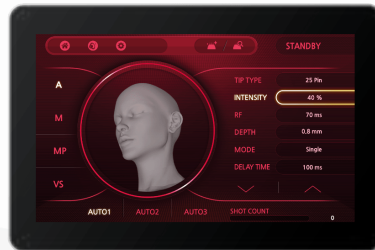

SmartCure

TERMO-PIHTILAŞMA TEKNOLOJİSİ

SmartCure akıllı elektro kalem kılcal varislerden, akne, kırışıklık'tan scar'a kadar geniş çaplı endikasyonları tedavi etmek için tekli elektrolis iğne, çeşitli nokor iğne ve kanüllerin kombinasyonu ile uygulanan termo koagulasyon teknikleridir.



K3i

İzoleli tek elektroliz iğnesi (0.075mm), **K3i** epidermiste ve çevresindeki dokuda hasar riski olmadan, ısıtma işlemini yalnızca hedef damara ileterek ince damarları tedavi eder.

Kılcal damarlar için 0.075(mm)'lik izole edilmiş iğne

AC-01

AC-01, yalıtımlı tekli iğne cilde yumuşakça nüfus eder ve yeniden kolajen oluşturarak, yeniden düzenleyerek kırışıklıkları giderir, cildin dokusunu iyileştirir.

1.5mm insulated needle for acne

28G / 19G

Kanül ucunda Rf enerjisi ile kombine edildiğinde kanülü cildin altına, cildin yüzeyine paralel olacak şekilde, dermis ve derialtı bezleri arasında ileri geri hareket ettirerek uzun süreli belirgin sıkılaşıma ve lipoliz sağlar.

Mono-Polar

NON - İNVAZİV RF TEKNOLOJİSİ

Mono Polar RF invaziv olmayan, tedavi mode dur. 2MHz lik RF enerjisi ile göz çevresi, alın kırışıklıkları tedavisinde yada mezoterapi PRP vs. ürünlerin cilde emilimi için kullanılır.



Teknik Özellikler

Micro-Needle Fractional FR system	
Maksimum Güç	Max. 25W + 10%
RF Frekansı	2MHz + 10%
Yoğunluk	0 ~ 100Level (2/5/10 step)
Tekrarlama	0.2 / 0.5 / 0.8 / 1 / 2sec / Single
İğne Kalınlığı	0.25mm
İğne Şekli	25 Electrode Needle (5x5) / 64 (10x10)
Tedavi Bölgesi	1cmx1cm 25 10x10
Ayarlanabilir Derinlik	0.5 ~ 3.5mm (0.1step) 64 15x15
Tedavi Süresi (RF emisyonu)	50ms ~ 950ms (delay time)
Elektrik Gücü	100-240VAC, 50/60Hz, 220VA Az

Mono Polar RF

RF Frekansı	2MHz $\pm$ 10%
RF Elektrodu	Mono Polar
Tedavi süresi (RF emisyonu)	1~60min (1min step)
RF Elektrod boyutu	Φ 15

Smart Cure

Maksimum Güç	9W
RF Frekansı	2MHz
Yoğunluk	10~100 Level (2Step)
İğne Modeli	AC1, K3i, 27G, 19G,



facebook.com/kocyigitmedikal



instagram.com/kocyigitmedikal



youtube.com/kocyigitmedikal